




Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o.

Łęczyńska 37, 20-309 Lublin,  
NIP 7120165368, REGON 430362055  
Nr tel. 81 525 85 51, Nr faks 81 525 86 93  
E-mail: cezas@cezas.com.pl

Dane aktualne na dzień: 16-10-2025 19:34

Link do produktu: <https://cezas.com.pl/materac-z-lusterkami-do-tunelu-piankowego-domek-p-10602.html>

## MATERAC Z LUSTERKAMI DO TUNELU PIANKOWEGO DOMEK

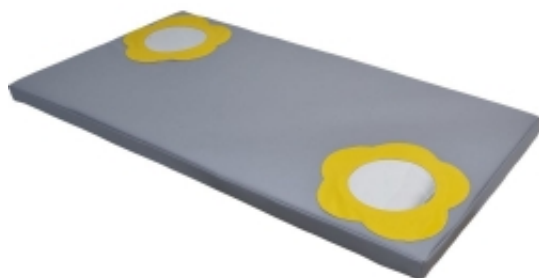

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                   | <b>349,00 zł</b>                                                                    |
| Dostępność             | <b>Na zamówienie</b>                                                                |
| Producent              | <b>PIANKOWE.PL</b>                                                                  |
| Dla szkoły/przedszkola |  |

### Opis produktu

## MATERAC Z LUSTERKAMI DO TUNELU PIANKOWEGO DOMEK

Materac do Tunelu piankowego DOMEK - materac rehabilitacyjny świetnie sprawdzi się jako dopełnienie do Tunelu Piankowego DOMEK, ale także do wypoczynku i zabawy, na przykład w kąciach wypoczynkowych. Nowoczesny wygląd sprawia, że jest doskonałym dopełnieniem wyposażenia przestrzeni przeznaczonych dla dzieci. Wykonany jest z materiału z powłoką PCV przeznaczonego dla wyrobów medycznych, dzięki czemu jest bardzo łatwy w czyszczeniu oraz dezynfekcji, **dolna warstwa jest antypoślizgowa**.

Produkt posiada certyfikację jako wyrób medyczny.

Piankowy materac posiada 2 lusterka akrylowe zamontowane na stałe, co dodatkowo uatrakcyjni zabawę.

Wymiary materaca: 120 x 60 x 5 cm

Tapicerka: materiał o zastosowaniu medycznym, powlekany PCW

Wypełnienie: średnio twarda pianka poliuretanowa o podwyższonej odporności na odkształcenia

Certyfikacja: **Wyrób medyczny**



### Polecane zastosowanie:

- jako wyposażenie dziecięcego pokoju
- w salach zabaw dla dzieci
- w żłobku, w przedszkolu, w szkole do kąci wypoczynkowych
- w kąciach dziecięcych w restauracjach
- w hotelach jako wyposażenie "Kids Club"

### Specyfikacja materiału:

#### Pokrowiec:

- materiał z powłoką PCV przeznaczony dla wyrobów medycznych, dzięki czemu jest bardzo łatwy w czyszczeniu oraz dezynfekcji;
- materiał zgodny z rozporządzeniem REACH, posiada atest Certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX ®
- nie zawiera ftalanów
- ognioodporny
- odporny na płyny fizjologiczne (krew, mocz, pot) oraz na alkohol
- odporny na UV, przez co może być także używany na zewnątrz
- odporny na zadrapania
- olejoodporny



#### Wypełnienie:

- średnio twarda pianka poliuretanowa o podwyższonej odporności na odkształcenia;
- posiada ATEST HIGIENICZNY wydany przez Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
- posiada atest Certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX ® – klasa produktów I wydany przez Instytut Włókiennictwa w Łodzi
- produkowana z surowców o podwyższonej jakości, nie powodujących zubożenia warstwy ozonowej

## Czyszczenie i konserwacja

### I. Czyszczenie i konserwacja

Tapicerkę należy czyścić powierzchniowo stosując dozwolone środki:

| Rodzaj zabrudzenia                | Dozwolone środki                                                                                                         | Postępowanie                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codzienne zabrudzenia             | Łagodny detergent najlepiej roztwór szarego mydła                                                                        | Czyścić regularnie z użyciem gąbki lub miękkiej szmatki. Na koniec przetrzeć czyszczone miejsce wilgotną szmatką (w celu usunięcia nadmiaru detergentu). |
| Miejscowe, silniejsze zabrudzenia | 25% roztwór alkoholu etylowego                                                                                           | Delikatnie przecierać nasączonym tamponem. Na koniec przetrzeć czyszczone miejsce wilgotną szmatką (w celu usunięcia nadmiaru detergentu).               |
| Dezynfekcja                       | Ogólnodostępne środki do dezynfekcji zawierające:<br>- aktywny chlor – dichloroizocyjanuran sodu, max stężenie 10000 ppm | Dezynfekować zgodnie z zaleceniami producenta używanego środka.                                                                                          |

**Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o.**

Łęczyńska 37, 20-309 Lublin,  
NIP 7120165368, REGON 430362055  
Nr tel. 81 525 85 51, Nr faks 81 525 86 93  
E-mail: cezas@cezas.com.pl

|  |                                                                                                          |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | - aktywny chlor - dwutlenek chloru w roztworze do 20 000 ppm<br>- alkohol izopropylowy max stężenie 70 % |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**Przed użyciem środka innego niż łagodny detergent trzeba sprawdzić efekt w niewidocznym miejscu, a samo czyszczenie wykonywać bardzo ostrożnie.**

**II. Informacje**

Szamponować przy użyciu gąbki

Nie prać!!! (delikatne wyroby)

Nie chlorować!!! (nie stosować do bielenia związków wydzielających wolny chlor)

Nie prasować!!! (nie dopuszczać do kontaktu z nagrzanymi powierzchniami np. kaloryfer)

Nie czyścić chemicznie!!!

**III. Warunki gwarancji**

Gwarancji nie podlegają:

- Trwałe przebarwienia powstałe wskutek kontaktu z odzieżą zawierającą aktywne, migrujące barwniki (np. jeans, zamsz itp.)
- Ślady z długopisu, tuszu, mazaków itp. zawierające aktywne barwniki
- Uszkodzenia wywołane przez wysoką temperaturę, płyny żrące, ogień
- Uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez zwierzęta domowe i innych użytkowników
- Wady powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji
- Granulat styropianowy w zależności od intensywności użytkowania ulega naturalnemu zużyciu/utlenianiu się. Zalecamy uzupełnianie go w zależności od stopnia zapotrzebowania.